

EN **ZEN-O lite™**  
**PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR**  
**QUICK USER GUIDE**

Use the device in its carry bag and in an upright position.  
Always use in a well ventilated location.



1. Open the battery compartment by pulling back the release latch, then insert the Zen-O lite™ battery.



2. Close the battery compartment ensuring the cover latches to the device.



3. Connect the AC power supply to your Zen-O lite™ concentrator.



**IMPORTANT: See user manual before use**

The package contains accessories and a user manual to get you started. Check to make sure you have the following: concentrator, battery, carry bag, AC and DC power cords. Always inspect the device and its accessories for any sign of damage before use.

4. Plug the other end of the AC power supply into an electrical outlet. Always use caution when inserting the power supply to an electrical outlet. The Zen-O lite™ portable oxygen concentrator can also be powered using the DC power supply in a vehicle or comparable power source.



5. Connect the cannula to the oxygen outlet of the device. Follow the cannula manufacturer's instructions to place correctly on the patient.



6. To turn the device on, press the power key.



7. Select the flow rate prescribed by your clinician and breathe normally. The flow rate can be adjusted by pressing the + and - keys on the device.




NL **BELANGRIJK: Lees voor gebruik, eerst de gebruikshandleiding. Deze verkorte handleiding vervangt de fabriekshandleiding niet.**  
De verpakking bevat de inhoud en een gebruikshandleiding om te starten. Controleer de inhoud op: Concentrator, accu, draagtas en gelijkstroom en wisselstroom benodigheden. Controleer tevens of het toestel en zijn accessoires op beschadigingen. Gebruik het toestel altijd in een recht opstaande positie en gebruik deze altijd in een goed geventileerde omgeving.

1. Open het batterij compartiment door de afsluitclip naar achteren te trekken om zodoende de batterijen erin te schuiven.
2. Sluit het batterij compartiment door de afsluitclip dicht te drukken.
3. Sluit de wisselstroom adapter (AC) aan op de Zen-O lite™ concentrator
4. Sluit de andere kant van de wisselstroom adapter aan de netstroom aansluiting. Wees altijd voorzichtig wanneer de stekker in het stop-contact gestoken wordt. De Zen-O lite™ draagbare concentrator kan ook aangesloten worden via de gelijkstroom adapter (DC) in de auto of vergelijkbare stroombron.
5. Sluit de neusbriil aan op de zuurstof uitgang van het apparaat. Volg de instructies zoals aangegeven door de neusbriil producent omtrent de toepassing ervan.
6. Om het toestel te starten dient men te drukken op de aan/uit knop.
7. Kies de flow instelling zoals aangegeven door de arts specialist en probeer normaal te blijven ademen. De flow instelling kan veranderd worden door op de + en - toetsen te drukken

**Attentie: om de levensduur van de batterijen zo optimaal mogelijk te houden, dient u bij nieuwe batterijen, deze eerst volledig op te laden en daarna helemaal leeg te draaien. Dit dient u een paar keer achterelkaar te doen om zo de max. capaciteit uit de batterij te kunnen halen. Voor een goed behoud hiervan dient u 1 keer per week de batterijen helemaal op te laden en leeg te maken. Ook wanneer u het apparaat weinig heeft gebruikt.**



ACTIVE. INDEPENDENT. IN CONTROL.

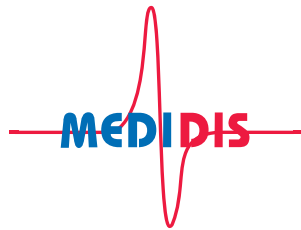

[www.medidis.nl](http://www.medidis.nl)

Tel.: 0320-267600 (ma-vrij van 08.30-17.00 uur, buiten kantooruren, met feestdagen en in het weekend uitsluitend voor storingen\* te bereiken).

\* bij storing dient u gebruik te maken van de 2 liter cilinders.

Doc. No: DL-00495 Rev. 01. Ti: 400x400, COL(BAR), V1

---

ZEN-O *lite*<sup>TM</sup>  
PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR  
QUICK USER GUIDE

