

Informatie over

- Innospire deluxe
- Pari Turboboy
- Salter Aire Elite



Welkom bij de start  
van uw therapie

## Welkom bij de start van uw therapie!

Verneveltherapie is het toedienen van inhalatiemedicatie door middel van een Aërosol. Aërosol betekent het inademen van fijne druppeltjes vloeistof die in de lucht zweven tijdens het vernevelen. Zo komt de inhalatiemedicatie diep in de luchtwegen, daar waar het hoort te werken. Men vernevelt drie soorten medicatie;

- luchtwegverwijdende middelen;
- ontstekingsremmers;
- antibiotica.

Zodra de medicijnjet is gevuld, wordt door middel van een vernevelapparaat (compressor) de medicatie verneveld en ingeademd via een mondstuk of vernevelmasker. Om zoveel mogelijk profijt te hebben van de therapie, is het belangrijk dat u de vernevelapparatuur en vernevelaccessoires goed gebruikt.

Deze handleiding is zorgvuldig samengesteld voor een goede voortzetting van uw verneveltherapie. Lees daarom zorgvuldig deze handleiding en reinigingsinstructies door.

## Wat mag u van ons verwachten

### Onderhoud Medidis

1. U heeft recht op één vernevelset per jaar met uitzondering van de AeroEclipse, u ontvangt deze twee keer per jaar.
2. U krijgt bij de eerste levering een luchtdichtbakje om alcohol in te bewaren. Alcohol kunt u in het afgesloten bakje een week bewaren.
3. Iedere cliënt die vernevelt, heeft recht op 1 fles alcohol 70% per maand.

### Bestellingen

Indien u een extra bestelling wilt plaatsen kunt u contact met Medidis opnemen. Het plaatsen van extra bestellingen kan voor eigen rekening komen, u wordt hierover te allen tijde vooraf geïnformeerd.

Telefoonnummer: 0320267600

E-mail: [verneveling@medidis.nl](mailto:verneveling@medidis.nl)

I.v.m wijzigingen volgens het protocol (LAN) is desinfectie met alcohol komen te vervallen. Uitkoken volstaat!

1x per week 5 min. de onderdelen (behalve masker en slang) in elkaar op laag vuur al roerend uitkoken. Zorg voor voldoende water in de pan, de onderdelen moeten de bodem niet raken. Op laten drogen op een schone pluisvrije, droge theedoek. Droog in een afgesloten schone bak/washand bewaren.

Kijk voor meer informatie op [www.medidis.nl](http://www.medidis.nl)



Blz.

## 5. Algemene bruikleenvoorwaarden

## 6. Veiligheid en waarschuwingen

## 8. Algemene productinformatie medicijnvernevelaar

- Welke onderdelen heeft u nodig?
- Overige accessoires en complexe verneveltherapie

## 10. Werkwijze verneveltherapie

- Het gereedmaken van de medicijnvernevelaar
- Het vullen van de medicijnjet
- Verneveltechniek
- Tips/adviezen
- Reinigings- en onderhoudinstructies

## 14. Mogelijke problemen en oplossingen

## 16. Complexe verneveltherapie (antibiotica) en AeroEclipse XL

- Vernevelen met antibiotica
- Reinigen van het gesloten systeem (Sidestream plus of Pari LC plus/Pari LC Sprint + filterhuis)
- AeroEclipse XL
- Bestellen

Wanneer u verneveltherapie voorgeschreven heeft gekregen door uw specialist of behandelend arts, krijgt u van Medidis een medicijnvernevelaar bij u thuis geleverd. Hieraan zijn de volgende bruikleenvoorwaarden verbonden;

- De door Medidis geleverde hulpmiddelen heeft u in bruikleen gekregen en blijven eigendom van Medidis.
- U heeft recht op de geleverde hulpmiddelen zolang uw specialist verneveltherapie nodig acht of zolang de machtigingsperiode van de zorgverzekeraar loopt. Dit kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
- Reparaties en/of het vervangen van onderdelen mogen uitsluitend door Medidis uitgevoerd worden.
- U dient voor de door Medidis verstrekte hulpmiddelen als een goede huisvader te zorgdragen.
- Bij schade, verlies, verpanding en diefstal en/of nalatigheid in gebruik van de in bruikleen verstrekte hulpmiddelen wordt u aansprakelijk gesteld voor de gemaakte kosten.
- Roken bij gebruik van de hulpmiddelen is niet toegestaan. Wanneer roken geconstateerd wordt, worden de kosten voor het schoon maken, vervanging van onderdelen of hulpmiddelen op u verhaald.

U dient contact op te nemen met Medidis indien:

- U overstapt naar een andere zorgverzekeraar.
- U gaat verhuizen.
- Er een verandering in uw medicatie- en vernevelfrequentie is.
- U mag stoppen met de verneveltherapie (een verklaring van de arts hebben wij nodig).
- De gebruiker overleden is.

Bovenstaande wijzigingen kunnen consequenties hebben voor uw verneveltherapie.

# Veiligheid en waarschuwingen

- Het gebruik van een vernevelaar wordt uitsluitend voorgeschreven door uw arts. Het gebruik van het apparaat vervangt de consultatie en behandeling bij de arts niet.
- Neem bij het gebruik van de vernevelaar de algemene hygiëne maatregelen in acht. Voor de te gebruiken medicatie, de dosering, de frequentie en de duur van de inhalatie moeten altijd de aanwijzingen van de arts of apotheker opgevolgd worden.
- Gebruik alleen medicatie die door uw arts of apotheker voorgeschreven of aanbevolen worden.
- Als u zich onpasselijk voelt na of tijdens het gebruik van de vernevelaar, dient u de toepassing onmiddellijk af te breken. Raadpleeg hiervoor uw arts.
- Houd de medicijnvernevelaar tijdens het gebruik uit de buurt van uw ogen, de medicamenten-nivel zou schade kunnen veroorzaken. Vernevelen in een goed geventileerde ruimte is belangrijk.
- Gebruik de medicijnvernevelaar niet bij aanwezigheid van brandbare gassen en hoge zuurstofconcentraties.
- Bewaar de medicijnvernevelaar en medicatie buiten bereik van kinderen om de kans op ongevallen en de kans op verstikking door inslikken van kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal te voorkomen.
- Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant/leverancier aanbevolen worden.
- De medicijnvernevelaar mag alleen op de op het typeplaatje opgegeven netspanning aangesloten worden.
- Dompel de compressor niet in het water en gebruik het niet in natte ruimtes. Er mogen in geen geval vloeistoffen in de compressor dringen.
- Bescherm de compressor tegen krachtige stoten.
- Neem het netsnoer nooit met natte handen vast, u zou een elektrische schok kunnen krijgen.
- De netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact trekken.
- Het netsnoer niet inklemmen, knikken, over scherpe randen trekken, niet naar beneden laten hangen en tegen hitte beschermen.
- Bij schade aan het netsnoer en de behuizing, gelieve met de klantenservice van Medidis contact opnemen.

## Attentie

- De compressor en het netsnoer mogen niet in de buurt van warmte bronnen bewaard worden.
- De medicijnvernevelaar mag niet in ruimtes gebruikt worden waarin voorheen sprays gebruikt werden. Voor de therapie moeten deze ruimtes gelucht worden.
- Het is om hygiënische redenen vereist dat elke gebruiker zijn eigen toebehoren gebruikt.
- Na het gebruik de stekker altijd uit het stopcontact trekken.
- U mag de compressor niet zelf openen of uit elkaar halen.
- Bij twijfel en/of vragen over het functioneren van de medicijnvernevelaar kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van Medidis.

## Welke onderdelen heeft u nodig?

### De Pari Turboboy bestaat uit:

- 1 x compressor
- 1 x netsnoer (220 volt aansluiting)



### De Salter Aire Elite bestaat uit:

- 1 x compressor
- 1 x netsnoer (220 volt aansluiting)



### De Innospire Deluxe bestaat uit:

- 1 x compressor
- 1 x netsnoer (220 volt aansluiting)



- Bij de compressor zit standaard een herbruikbare (re-usable) open vernevelset. Dit bestaat uit:
- 1 x luchtslang;
  - 1 x medicijnjet (cupje) bij Innospire & Pari of een AeroEclipse XL (Salter);
  - 1 x mondstuk/masker;
  - 1 x luchtfilter (Pari)/4 x luchtfilters (Innospire en Salter).



Pari



Innospire



AeroEclipse

- Als reserve noodset zit er een disposable (wegwerp) set bij bestaande uit:
- 1 x medicijnjet;
  - 1 x mondstuk.

### Complexe verneveltherapie (antibiotica) en AeroEclipse XL

Voor gesloten vernevelsystemen, AeroEclipse XL, tracheamaskers etc. verwijzen wij u naar blz. 16-20.


## Het gereedmaken van de medicijnvernevelaar

Voor het gebruik van complexe verneveltherapie zie: bladzijde 16.

1. Was uw handen grondig.
2. Bij Pari: monteer de losse onderdelen van de verneveljet.
3. Zorg altijd voor een vaste ondergrond van de compressor en plaats de compressor niet op de vloerbedekking, de ventilatiegaten moeten vrij blijven.
4. Zorg, indien van toepassing dat het netsnoer aan de compressor gemonteerd is en stop het in het stopcontact.
5. Sluit één eind van de luchtslang aan op de luchtuitlaat van de compressor.
6. Sluit het andere eind van de luchtslang aan op het onderste gedeelte van de medicijnjet/AeroEclipse.
7. Plaats de verneveljet in de daarvoor ontworpen ronde opening in de compressorbehuizing.
8. Open de deksel (Pari) of schroef de deksel van de medicijnjet (Innospire) of AeroEclipse (Salter) los.
9. Haal de door uw arts voorgeschreven medicatie uit de verpakking.
10. Vul de medicijnjet (in het onderste gedeelte) met de medicatie en schroef de deksel vast of klik de deksel dicht.
11. Sluit het mondstuk/masker aan op de uitgaande opening van de medicijnjet.

**LET OP AeroEclipse: Voor continu-verneveling (niet voor gebruik antibiotica) moet de modusselector op continu-modus staan:  $\Delta$  (zie afbeelding 1)**

5a ademgestuurde modus

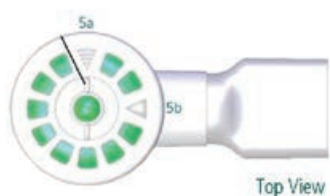

5b continu-modus

Afbeelding 1

## Verneveltechniek

1. Zet de compressor aan.
2. Ga in een comfortabele en rechte houding zitten.
3. Gebruik bij voorkeur een mondstuk. Sluit uw lippen om het mondstuk en adem in door uw mond. Houdt hierbij het mondstuk of masker van de vernevelkamer zo horizontaal mogelijk.
4. Adem zo snel als comfortabel voor u is. Probeer af en toe diep in te ademen, dit verhoogt de afgifte in uw longen.
5. Na het inademen is het raadzaam even uw adem in te houden alvorens weer uit te ademen.
6. Praat niet tijdens het vernevelen. Als een korte pauze nodig is, zet dan de compressor even uit.
7. De behandeling is afgelopen als de vernevelaar begint te sputteren, er geen nevel meer uit het apparaat komt of wanneer u ervaart dat deze een ander geluid produceert. U kunt de compressor uitzetten.

## Tips/adviezen

1. Na het vernevelen kunt u eventueel ontstaan vocht uit de luchtslang verwijderen door de compressor nog even (ongeveer 10 seconden) weer aan te zetten zonder gemonteerde verneveljet.
2. Laat uw techniek regelmatig controleren door arts, long- of COPD- verpleegkundige of lid van het cystic fibrosis-team.
3. Kinderen die te klein zijn voor het mondstuk moeten aangemoedigd worden om een masker op te zetten; of anders dient het masker zachtjes tegen het gezicht te worden gedrukt.
4. Zorg dat de ruimte waar verneveld wordt goed kan worden geventileerd.
5. Mocht bij het gebruik van een masker de huid geirriteerd raken, dan is het raadzaam contact op te nemen met uw arts.



## Reinigings- en onderhoudsinstructies

Reinig standaard medicijnjet/AeroEclipse na elke vernevelbeurt.

1. Haal de luchtslang van de medicijnjet. Bij de Pari Turboboy kan de luchtslang eenvoudig gemonteerd blijven op de compressor tot het volgende vernevelmoment. Indien u deze toch wenst te demonteren, dan gelieve te wachten totdat deze slang volledig is afgekoeld en vervolgens licht wringend bewegen bij het daarvoor ontwikkelde witte connectordeel.
2. De medicijnjet dient na elke verneveling uit elkaar gehaald te worden en enkele minuten in handwarm water met afwasmiddel (om het vette medicijn goed te verwijderen) gelegd te worden.
3. Zorg dat alle losse onderdelen, mondstuk, vernevelmasker, medicijnjet, evt. inzetstuk goed schoongemaakt worden. Dit voorkomt verstopping.
4. Na het afspoelen dient u de losse onderdelen afzonderlijk te laten drogen op een pluisvrije, droge theedoek. Wij raden u aan de pluisvrije, schone en droge theedoek ook over de losse onderdelen te vouwen, opdat geen stof uit de lucht neerdaalt op de onderdelen. Wanneer de onderdelen opgedroogd zijn, kunt u deze stofvrij opbergen.

### LET OP:

- **Leg de luchtslang nooit in het water!**
- **Onderdelen nooit afdrogen met een theedoek in verband met bacteriele infecties.**
- **Eventuele verstopte gaatjes nooit doorprikken.**
- **De medicijnjet met de te vernevelen vloeistof, mag nooit worden bijgevoeld.**

## Algemeen

1. De medicijnjet/AeroEclipse met mondstuk/masker dienen elke 24 uur gereinigd te worden en daarna gedesinfecteerd met alcohol 70% (onderdompelen in het bakje) en aan de lucht gedroogd. Alcohol kunt u in het afgesloten bakje een week bewaren.
2. Luchtfilters moeten volgens voorschrift van fabrikant 4 x per jaar (geldt niet voor de Pariboy, deze maar 1 x per jaar) vervangen worden.
3. De nood disposable vernevelset is uitsluitend te gebruiken in geval van nood, u dient contact met Medidis op te nemen wanneer deze gebruikt wordt/is.

## Algemeen

1. De medicijnjet/AeroEclipse met mondstuk/masker dient elke 24 uur gereinigd te worden en daarna gedesinfecteerd met alcohol 70% (onderdompelen in het bakje) en aan de lucht gedroogd. Alcohol kunt u in het afgesloten bakje een week bewaren.
2. Vervangen van de luchtfilters:
  - Salter en Innospire 4x per jaar
  - Pari 1x per jaar
3. De disposable vernevelset is uitsluitend te gebruiken in geval van nood, u dient contact met Medidis op te nemen wanneer deze gebruikt wordt/is.

## Mogelijke problemen en oplossingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Verneveltijd neemt toe	De kans is groot dat het medicijn cupje niet goed is schoongemaakt	Doorloop nogmaals de stappen volgens de reinigingsinstructie op bladzijde 9
Compressor start niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netsnoer is niet goed aangesloten op het apparaat.</li> <li>- De netstekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>- Thermische bescherming is geactiveerd.</li> <li>a) Te hete omgeving of nabij verwarmingsapparaat gebruikt.</li> <li>b) Luchtopeningen zijn belemmerd/slechte ventilatie.</li> </ul> <p>Maak het apparaat nooit open, er kan geen onderhoud aan de onderdelen worden verricht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of het netsnoer goed aan de compressor is aangesloten (geldt niet voor de Innospire).</li> <li>- Controleer of de netstekker goed in het stopcontact zit</li> <li>a) Zet het apparaat uit en laat 60 minuten afkoelen. Verplaats het apparaat indien nodig, het luchtfilter aan elkaar.</li> <li>b) Vervang indien nodig het luchtfilter en zorg voor een goede ventilatiestroom.</li> </ul>
Uit het medicijnjet komt geen medicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De sproeier van de medicijnjet is verstopt.</li> <li>- De aansluiting is niet goed aangesloten.</li> <li>- De aansluitslang is lek.</li> </ul>	<p>Reinig de verneveljet volgens reinigingsprocedure of vervang het medicijn cupje bij onvoldoende resultaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de slangaansluitingen goed zitten.</li> <li>- Vervang de slangaansluiting.</li> </ul>

Mocht een van op blz. 14 genoemde oplossingen niet de reden zijn van storing en er is geen stroomstoring neem dan z.s.m contact met Medidis op:

Telefoonnummer: 0320-267600 (ma-vrij 08.30-17.00 uur) buiten kantoortijden zijn wij in geval van spoed/storing op hetzelfde nummer bereikbaar.



# Complexe verneveltherapie (antibiotica) en AeroEclipse XL



## Vernevelen met antibiotica\*

Bij het vernevelen van antibiotica maakt u gebruik van een gesloten systeem met filterhuis (sidestream plus/Pari LC Sprint en filterhuis of de AeroEclipse). Dit systeem voorkomt prikkeling van ogen en luchtwegen, zowel voor de gebruiker als omstanders. In het filterhuis plaatst u bij elke antibiotica verneveling een nieuw filterpad.

- \* Bij het medicijn pentamidine, moet een disposable gesloten systeem geleverd worden dat na elke verneveling moet worden weggegooid.

## Het gereedmaken van de medicijnvernevelaar:

1. Was uw handen grondig.
2. Bij Pari: monteer de losse onderdelen van de verneveljet.
3. Zorg altijd voor een vaste ondergrond van de compressor en plaats de compressor niet op de vloerbedekking, de ventilatiegaten moeten vrij blijven.
4. Zorg, indien van toepassing dat het netsnoer aan de compressor gemonteerd is en stop het in het stopcontact.
5. Sluit één eind van de luchtslang aan op de luchtuitlaat van de compressor.
6. Sluit de het andere eind van de luchtslang aan op het onderste gedeelte van de medicijnjet.
7. Plaats de verneveljet in de daarvoor ontworpen ronde opening in de compressorbehuizing.
8. Open de deksel (Pari en AeroEclipse) of schroef de deksel van de medicijnjet los (Innospire).
9. Haal de door uw arts voorgeschreven medicatie uit de verpakking.
10. Vul de medicijnjet (in het onderste gedeelte) met de medicatie en schroef de deksel vast of klik de deksel dicht.
11. Stop een filterpad in het filterhuis. Sluit het T-stuk aan op het medicijn cupje en koppel het filterhuis eraan vast. Het medicijn cupje moet verticaal blijven. Het mondstuk moet horizontaal van het medicijn cupje aan het T-stuk worden gekoppeld.

## Verneveltechniek

1. Zet de compressor aan.
2. Ga in een comfortabele en rechte houding zitten.
3. Gebruik bij voorkeur een mondstuk. Sluit uw lippen om het mondstuk en adem door uw mond. Houd hierbij het mondstuk of masker van de verneveljet zo horizontaal mogelijk.
4. Adem zo snel als comfortabel voor u is. Een af en toe langzame diepe inademing verhoogt de afgifte in uw longen.
5. Na het inademen is het raadzaam even uw adem stil te houden alvorens weer uit te ademen.
6. Praat niet tijdens het vernevelen. Als een korte pauze nodig is, zet dan de compressor even uit.
7. De behandeling is afgelopen als de vernevelaar begint te sputteren of wanneer u ervaart dat deze een ander geluid produceert. U kunt de compressor uitzetten.

## Reinigen van het gesloten systeem

Na elke vernevelbeurt (bij meerdere keren dagelijks vernevelen)

- Trek handschoenen aan.
- Haal de luchtslang van het medicijnjet.
- De filterpad dient na elke vernevelbeurt te worden weggegooid.
- Laat indien nodig, de compressor nog even door blazen, opdat eventueel ontstaan condens uit de luchtslang geblazen wordt.
- De medicijnjet en het filterhuis dienen na elke verneveling uit elkaar gehaald te worden en enkele minuten in handwarm water met afwasmiddel (om het vettige medicijn goed te verwijderen) gelegd te worden.
- Zorg dat alle onderdelen, mondstuk, vernevelmasker, filter behuizing, medicijnjet goed schoon-gemaakt worden. Dit voorkomt verstopping.
- Na het afspoelen dient u de losse onderdelen afzonderlijk te laten drogen op een pluisvrije, droge en schone theedoek. Wij raden u aan de theedoek ook over de losse onderdelen dicht te vouwen, opdat geen vervuiling uit de lucht neerdaalt op de onderdelen. Wanneer de onderdelen opgedroogd zijn, kunt u deze stofvrij opbergen.

## LET OP:

- Leg de luchtslang nooit in het water!
- Onderdelen nooit afdrogen met een (thee)doek in verband met bacteriele infecties.
- Eventuele verstopte gaatjes nooit door prikken.
- Een vernevelset wordt 1x per jaar verstrekt.
- De medicijnjet met de te vernevelen vloeistof, mag nooit worden bijgevuld

## Algemeen

- De medicijnjet met mondstuk/masker en filterhuis dienen elke 24 uur gereinigd te worden en daarna gedesinfecteerd met alcohol 70% (onderdompelen in het bakje) en aan de lucht gedroogd. Alcohol kunt u in het afgesloten bakje een week bewaren.
- Luchtfilters moeten volgens voorschrift van fabrikant 4x per jaar (geldt niet voor de Pariboy, deze 1x per jaar) vervangen worden.
- De nood disposable vernevelset is uitsluitend te gebruiken in geval van nood, u dient contact met Medidis op te nemen wanneer deze gebruikt wordt/is.

## Onderhoud Medidis

1. U heeft recht op één vernevelset en filterhuis per jaar.
2. U krijgt bij de eerste levering een luchtdichtbakje om alcohol in te bewaren. Alcohol kunt u in het afgesloten bakje een week bewaren.
3. Iedere client die vernevelt, heeft recht op 1 fles alcohol 70% per maand.
4. U heeft recht op filterpads voor gebruik van het filterhuis. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan dit tot een maximum bedrag worden vergoed.

## AeroEclipse XL


### LET OP:

De AeroEclipse kan medicatie toedienen in ADEMGESTUURDE of CONTINU-modus. In de ADEMGESTUURDE modus wordt medicatie alleen toegediend bij inademing en kan leiden tot een verhoging van de aan de longen afgegeven dosis.

Continu-modus (NIET toegestaan met het vernevelen van antibiotica)

1. Was uw handen grondig.
2. Draai de bovenzijde van de medicijnjet eraf en verwijder deze.
3. Haal de door uw arts voorgeschreven medicatie uit de verpakking.
4. Vul het medicijnjet met de voorgeschreven medicatie.
5. Bevestig de bovenzijde van de medicijnjet en draai deze voorzichtig met de hand vast tot een stop wordt gevoeld.
6. Voor continu verneveling moet de modusselector op continu-positie staan:  $\Delta$  (zie afbeelding 1)
7. Sluit het uiteinde van de luchtslang op het onderste gedeelte van de medicijnjet aan. Sluit het andere uiteinde op de luchtuitlaat van de compressor aan. Zorg dat beide uiteinden goed vast zitten. Voor het gereed maken van de compressor en de verneveltechnieken verwijzen wij u naar bladzijde 16 en 17.
8. Sluit het mondstuk/masker aan op de uitgaande opening van de medicijnjet.

5a ademgestuurde modus

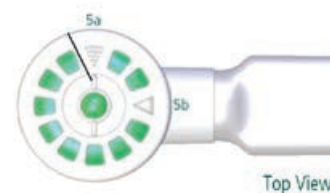

5b continu-modus

Afbeelding 1

## Ademgestuurde modus

U gebruikt het ademgestuurd vernevelen als de arts dit heeft voorgeschreven bijvoorbeeld bij het vernevelen van antibiotica. Verzekert dat de modusselector in de ademgestuurde positie staat, zie afbeelding 1 op bladzijde 19, 5a.


1. Was uw handen grondig.
2. Draai de bovenzijde van de medicijnjet eraf.
3. Vul de medicijnjet met de voorgeschreven medicatie.
4. Bevestig de bovenzijde van de medicijnjet, draai deze voorzichtig met de hand vast tot een stop wordt gevoeld. Zorg dat de medicijnjet rechtop blijft zodat er geen medicatie wordt geknoeid.
5. Voor ademgestuurde verneveling moet de modusselector op ademgestuurde positie staan.
6. Sluit het uiteinde van de luchtslang op het onderste gedeelte van de medicijnjet aan. Sluit het andere uiteinde op de luchtuitlaat van de compressor aan. Zorg dat beide uiteinden goed vast zitten. Voor het gereed maken van de compressor en de verneveltechnieken verwijzen wij u naar bladzijde 16 en 17.
7. Sluit het mondstuk/masker aan op de uitgaande opening van de medicijnjet.
8. Adem tijdens het vernevelen langzaam en diep in. U krijgt alleen medicatie binnen als u inademt.

## Onderhoud

Voor onderhoud kunt u de instructies aanhouden van blz. 17 en 18.

Filterpads zijn bij de AeroEclipse niet nodig. Anders dan bij de andere gesloten systemen dient de AeroEclipse elk half jaar vervangen te worden.



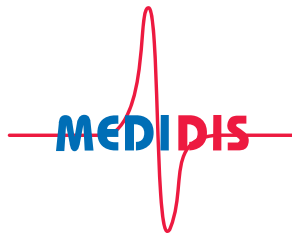

## Neem contact met ons op

@ cpap@medidis.nl

☎ 0320 267 600

💻 [www.medidis.nl](http://www.medidis.nl)

### Hoofdkantoor

Archimedeslaan 11  
8218 ME LELYSTAD  
0320 267 600

### Kantoor Drachten

De Fok 8  
9206 BD DRACHTEN  
0512 539 630

### Openingstijden

Ma t/m vr  
van 8.30 uur tot 17.00 uur

Op onze website: [www.medidis.nl](http://www.medidis.nl) vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en meer informatie over uw therapie. Om u gebruik te vergemakkelijken kunt u hier comfortartikelen bestellen. Comfortartikelen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.